


MP-30

Bomba de jeringa Perfusora modular de 1 canal.



Compatibilidad con Central de Monitoreo MP - 900

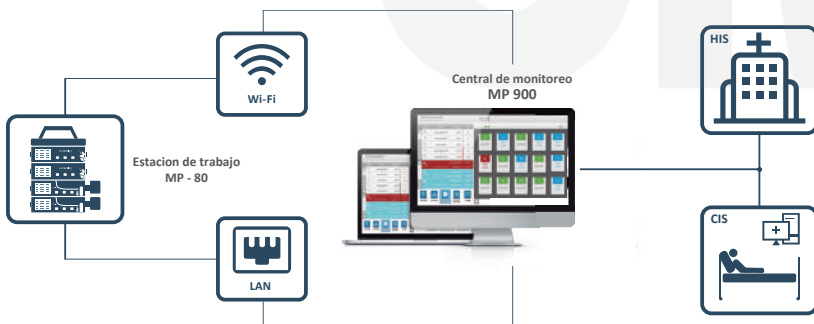


Pantalla Táctil

Excelente visualización, permite la configuración rápida y exacta.

Bomba de jeringa MP-30


9 Modos de Infusión

- Modo velocidad.
- Modo tiempo.
- Modo peso.
- Modo trapecio.
- Modo carga de dosis
- Modo secuencia.
- Modo Tiva
- Modo Micro
- Modo relevo (requiere de estación modular).

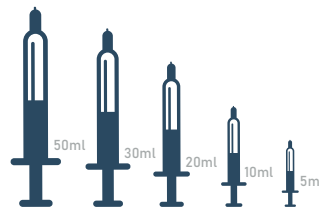

Excelente compatibilidad

Puede trabajar con jeringas de: 5, 10, 20, 30, 50ml

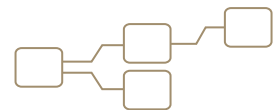

Arquitectura Modular ¡Sólo basta conectarlas y listo!

Diseño modular, que permite combinar bombas libremente según su necesidad.

Especificaciones Técnicas

Modos de Infusión:	Modo velocidad. Modo tiempo. Modo peso. Modo trapecio. Modo carga de dosis Modo secuencia. Modo Tiva Modo Micro Modo relevo (requiere de estación modular).
Alimentación:	100-240 VAC. Entrada DC 12V. Batería recargable interna. (5 horas de trabajo continuo)
Dimensiones:	244 (ancho) x 74 (alto) x 164 (profundo) mm.
Peso:	1.8 Kg (incluyendo batería).
Precisión:	+/- 1%. (Mecánica). +/- 2% (Incluyendo jeringa).
Rango de Ajuste de Flujo:	0.1-100.0mL/h (Jeringa 5 ml) 0.1-300.0mL/h (Jeringa 10ml) 0.1-600.0mL/h (Jeringa 20ml) 0.1-900.0mL/h (Jeringa 30ml) 0.1-2000.0mL/h (Jeringa 50mL) el incremento mínimo es de 0.1mL/h.
Rango de Ajuste de Volumen:	0.1-99999.9 mL
Purga:	100.0mL/h (Jeringa 5 ml) 300.0mL/h (Jeringa 10mL) 600.0mL/h (Jeringa 20ml) 900.0mL/h (Jeringa 30mL) 2000.0mL/h (Jeringa 50mL)
Bolos:	0.1-100.0mL/h (Jeringa 5 ml) 0.1-300.0mL/h (Jeringa 10ml) 0.1-600.0mL/h (Jeringa 20ml) 0.1-900.0mL/h (Jeringa 30mL) 0.1-2000.0mL/h (eringa 50mL)
KVO:	0.1-5mL /h
Nivel de Oclusión:	11 niveles (225 mmHg ~ 975 mmHg)

Alarmas:	Finalización cercana. Medicamento agotado. Infusión finalizada. Alarma de oclusión. Batería baja. Batería agotada. Sin batería Sin fuente de energía. Sin jeringa. Mantener abierto. Alarma de recuerdo. Alarma de auto test. Alarma infundiendo.
-----------------	---

Modular,
apilable hasta
15 canales.



Accesorios Opcionales:

- Estación modular (para modo relevo).
- Escáner de código de barras.
- Botón de llamado a enfermería.
- Sensor de goteo (para modo goteo)
- central de monitoreo central de infusión.
- Módulo de comunicación wifi

(Permite la conexión al sistema de monitoreo central de infusión).

Portátil y liviano.

Características de Hardware:

Diseño modular.
Pantalla táctil.
Estilo Smart Phone.
Cambio de flujo en tiempo real.
Purga.
Memoria última configuración.
Fácil apertura de puerta.
Fácil y rápido ajuste de jeringa.
Perilla de ajuste multiposición.
(4 formas de ajuste).

Seguridad y Confianza:

KVO (mantenimiento de vena abierta).
Bloqueo de pantalla.
Recuerdo de Inicio.
Volumen de alarma (5 niveles).

Características de Software:

Modo nocturno.
Nivel de luz de fondo intercambiable (5 niveles).
Estilo de fondo intercambiable (7 fondos).
Función Stand By.
Recordatorio de mantenimiento.
Registro de historia (hasta 2000 eventos).
Administración de información del paciente.

Conexión:

Tres (3) Puertos USB para conexión de sensor de goteo, Botón de llamado a enfermería, estación modular o escáner de código de barra.

