




CAMILLA ELÉCTRICA

DE BIPEDESTACIÓN CM 138



Características:

- Cambio de posición horizontal a vertical y viceversa que se acciona por medio de control de mando eléctrico. Motor de empuje máx. 6000 N, silenciosos y libres de mantenimiento y módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- Colchoneta amortiguable para dorso y cabeza, fabricado cordobán lavable, espuma de 3 cm de alta densidad que lleva correas de seguridad ajustables.

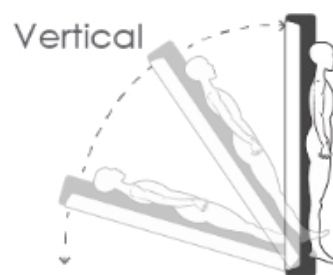

Especificaciones:

- Fabricada en tubería acero cold rolled.
- Tendido fabricado en madera MDF, moldeado, con ranuras para fácil adaptación del paciente y soporte para pies en alfajor antideslizante
- 4 ruedas de 5" con freno para asegurar después de desplazamiento.
- Dimensiones: Largo 1.96 m, Ancho 0.60m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga : 150 kg - 200 kg.
- Terminado en pintura electrostática