

Silla de Ruedas Neurológica para Adulto

Reg. Sanitario: 2016DM-0015030
Ref. PH5002

*Sistema de reclinación y basculación del respaldo que facilita la ingesta de alimentos, favorece la postura prolongada en sedente y tolerancia de la misma evitando la aparición de escaras en la zona glútea al distribuir fuerza de gravedad.

*Mantiene la postura adecuada por la alineación que ofrece el soporte cefálico y los soportes de tronco.

*La pechera ajustable evita que el tronco se desplace hacia delante cuando el espaldar y el asiento están a 90°.

*Evita la prolongación de curvaturas anormales en la columna como la escoliosis dorso lumbar, a través de los soportes ajustables en posiciones 1 y 2.

*Apta para niños y adultos a partir de 12 años por su sistema ajustable de soportes de tronco.


*Las Ruedas de 24" permiten la rehabilitación de los miembros superiores al realizar autopropulsión.

*El tope abductor evita que el cuerpo del paciente se desplace hacia delante. Evita el patrón de tijera a través del tope abductor.

*Asiento y espaldar ergonómico para brindar mayor confort.

*Espaldar reclinable hasta 175° que brinda periodos de descanso y facilita procedimientos clínicos y terapéuticos.

Características

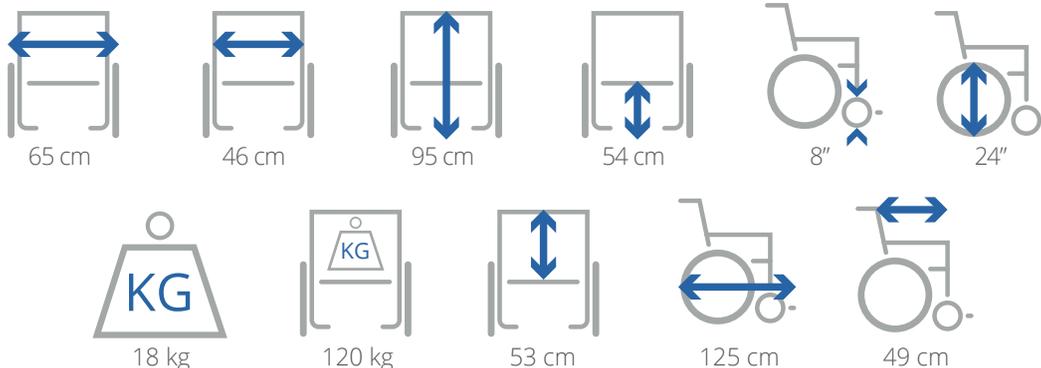

Manual de Usuario

Si incluye, Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, Ensamblado, Consejos de seguridad, Mantenimiento, Precauciones y Plan de Ejercicios Físicos.

Garantía

1 Año sobre estructura en acero, No cubre Rodamiento, tapicería o mal uso del dispositivo medico

