



## NEBULIZADOR MÉDICO

NB - 206B



- Terapias domiciliarias
- Uso en el hogar
- Instituciones y hospitales



El nebulizador todo en 1 LENZ, está diseñado para administrar de manera eficiente la solución prescrita para tratar trastornos respiratorios.

**Apto para uso en:**

- Terapias domiciliarias
- Uso en el hogar
- Instituciones y hospitales

44-51



1000h



**Psi**

**Tecnología**

**Trabajo**

**Incluye kit**

**Con estuche**

**Para**

**Partículas**

de presión

anticalentamiento

continuo

de nebulización

tipo maletín

toda la familia

<0.5 - 5um (80%)



Tecnología alemana



El nebulizador médico TODO EN 1, llegó para revolucionar el mercado con un diseño y fabricación innovadores, logrando mayor rendimiento y multifuncionalidad (uso continuo en hospitales, instituciones y en el hogar).



Mascarilla adulto y pediátrica en silicona



Tubo de aire en silicona



Copa dosificadora

## Especificaciones Técnicas

<b>Referencia</b>	NB-206B
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 110V/60HZ
<b>Consumo de energía</b>	≤ 70W
<b>Dimensiones</b>	180*205*100 mm
<b>Rango de presión</b>	44-51 psi; 0.30- 0.35 Mpa
<b>Flujo de operación</b>	12- 16 LPM
<b>Peso neto</b>	1.45 Kg
<b>Tasa de nebulización</b>	0.25- 0.30 ml /min
<b>Nivel de ruido</b>	< 0.5-5 um (80%)
<b>Peso</b>	< 53 dB (A)
<b>Medicación</b>	2-10 ml
<b>Rango de temperatura de operación</b>	10°C a 40°C (50°F a 104°F)

## ¿ Qué incluye ?

- Dispositivo
- 5 filtros
- 1 boquilla
- 1 copa dosificadora
- Mascarilla adulto y mascarilla pediátrica
- Manual de usuario y empaque en portátil

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Rango de humedad de operación


10% ~ 95% RH

Temperatura de almacenamiento

-20°C-70°C (-4°F A 158°F)

## Partes del dispositivo

- 1 Mascarilla
- 2 Tubo de aire en silicona
- 3 Copa de medicación
- 4 Manillar de transporte
- 5 Botón de encendido y apagado
- 6 Aberturas de ventilación
- 7 Conector de salida de aire
- 8 Filtro y tapa de filtro
- 9 Soporte para copa o cámara

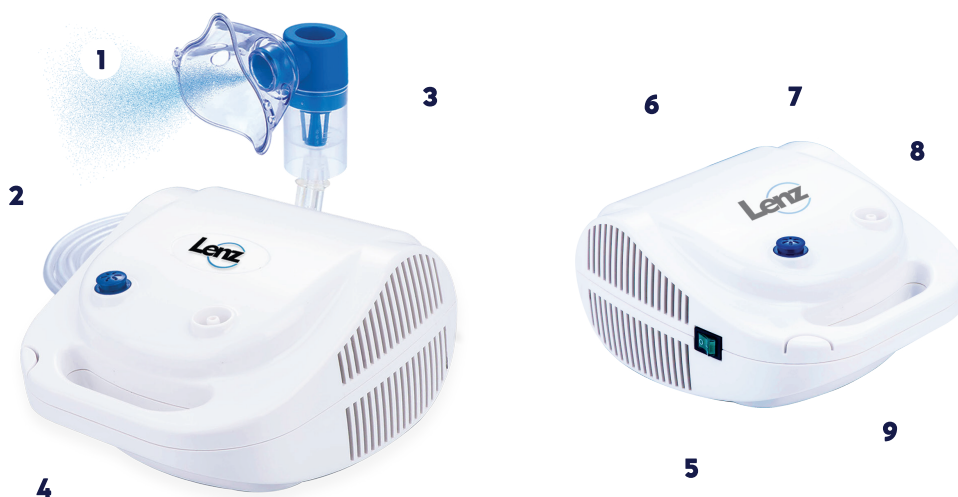

## Mantenimiento

- 1 El filtro de aire debe ser reemplazado cuando se torne de color gris.
- 2 El resto del dispositivo debe ser inspeccionado solo por personal autorizado