


Nebulizador de compresión B.Well MED-120



El nebulizador de compresión B.Well MED-120, silencioso y compacto, es el dispositivo perfecto para ayudarle a cuidar de su salud.

Nebulizador compacto, con unas dimensiones de 100 × 54 × 51 mm, cómodo de usar y fácil de guardar.

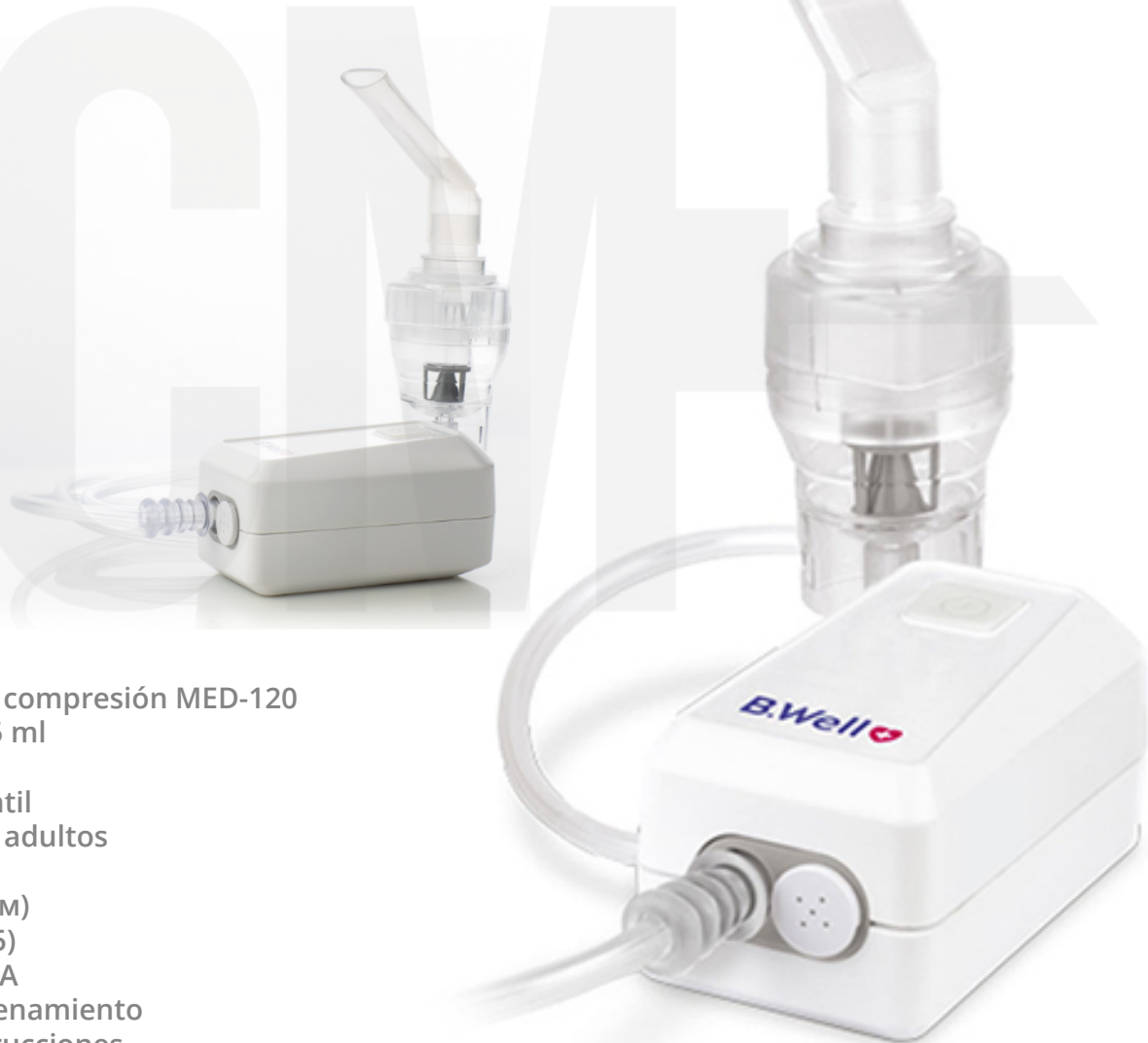

INCLUYE:

- Nebulizador de compresión MED-120
- Nebulizador 2-5 ml
- Aplicador bucal
- Mascarilla infantil
- Mascarilla para adultos
- Nose piece
- Tubo de aire (1 m)
- Filtros de aire (5)
- Adaptador de CA
- Bolsa de almacenamiento
- Manual de instrucciones

✓ Nebulizador moderno

Inhalación óptima: administración eficaz del medicamento hasta el órgano de actuación.

✓ Tamaño medio de las partículas (DMMA) de 2,9 μm

El medicamento llega hasta las vías respiratorias bajas.

✓ Fracción respirable del 71,1 %

Administra el medicamento de manera eficaz. La cantidad de medicamento que entra en los pulmones durante la inhalación depende de la fracción respirable. La fracción respirable es el porcentaje de partículas del tamaño requerido en el aerosol inhalado. El nebulizador B.Well genera un aerosol con un 71,1 % de partículas de tamaño inferior a 5 μm . Esto significa que el dispositivo administra eficazmente el medicamento a través de los pulmones hasta los alvéolos.

✓ Alta velocidad de nebulización: 0,3 ml/min

El nebulizador MED-120 genera un aerosol con una velocidad de nebulización de 0,3 ml/min, óptima para una inhalación cómoda.

✓ Adecuado para niños y adultos

Incluye 2 máscaras: tamaño infantil y adulto. Además, en el caso de los adultos se recomienda el uso del aplicador bucal.

✓ Aplicador nasal

Favorece el tratamiento de la congestión nasal en niños y adultos.

✓ Silencioso

Bajo nivel de ruido: equivalente al que hace la lluvia al caer.

✓ Compacto

Gracias al tamaño reducido de solo 100 x 54 x 51 mm es cómodo de usar y fácil de guardar.

✓ Cumplimiento de la normativa

La eficiencia médica cumple la norma europea EN-13544 relativa a los sistemas de nebulización.

✓ Práctico soporte para el nebulizador

El soporte mantiene el nebulizador en posición vertical para que el medicamento no se derrame.

✓ Alimentación por micro-USB

El dispositivo MED-120 se alimenta a través de un micro-USB: moderno, cómodo y siempre a mano. La fuente de alimentación puede ser una batería externa, un ordenador portátil o un PC. El micro-USB y el adaptador están incluidos en el conjunto.



Funcionamiento silencioso



Dos mascarillas: comodidad para niños y adultos



Alimentación a través de un puerto micro-USB: práctico y siempre a mano.



Nebulizador innovador: tratamiento eficaz para las vías respiratorias bajas



Práctico soporte para el nebulizador