



CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

Drive Devilbiss IGO2



Tecnología Patentada
SmartDose™



del POC más sensible



Cumplimiento con
las normas FAA



Peso menor de
2,2 kg



Alta calidad y
durabilidad de POC

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ajustes de pulso 1-5 ahora con dosis inteligente
- ✓ Tecnología de ajuste automático SmartDose
- ✓ Hasta 9 horas de duración de la batería (configuración 2 - XB)
- ✓ Menos de 2,3 kg
- ✓ Diseño robusto, incluye sobremolde protector.
- ✓ Conectividad Bluetooth con la aplicación SmartLink O2
- ✓ Monitoreo remoto de dispositivos
- ✓ 2 años de garantía para la unidad, 1 año de garantía para los tamices y la batería.



Dosis inteligente

La tecnología patentada SmartDose ajusta automáticamente la salida de oxígeno en función del patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria del paciente. Esto aumenta la dosis de oxígeno para satisfacer la demanda del paciente cuando está activo y ahorra batería cuando no lo está.

Beneficios del Bluetooth para los pacientes

Los pacientes pueden monitor ear fácilmente las condiciones de funcionamiento de su concentradora través de la aplicación SmartLinkO2 (iOS y Android), que incluye:

- ✓ Duración restante de la batería en horas
- ✓ Comprobación de la concentración de oxígeno


notificarán al usuario sobre el rendimiento del concentrador proporcionando mayor tranquilidad.

Beneficios

La aplicación web SmartLinkO2 basada en la nube permite la monitorización remota del rendimiento de un concentrador:

- ✓ Datos de uso y cumplimiento del paciente, frecuencia respiratoria y configuración

La sencilla resolución de problemas a distancia evita el tiempo de inactividad del paciente y las costosas visitas no programadas, lo que ahorra tiempo y dinero.

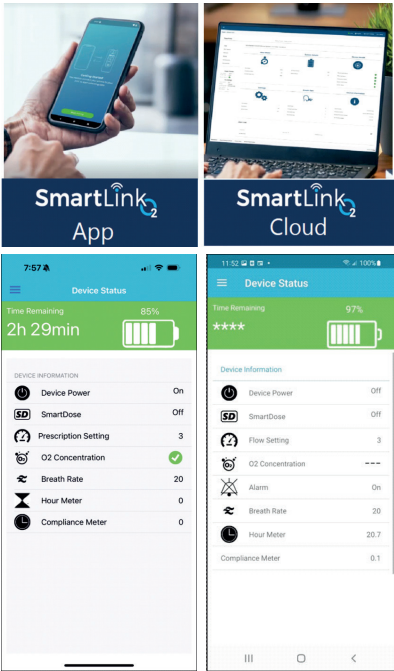

CONFIGURACIÓN	iGo2	
	Batería única	XB-Batería adicional
Configuración 1	5:00 horas	10:00 horas
Configuración 2	3:30 horas	7:00 horas
Configuración 3	2:30 horas	5:00 horas
Configuración 4	1:40 horas	3:20 horas
Configuración 5	1:20 horas	2:40 horas

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

2,2 kg
DE PESO

PUREZA DE
OXÍGENO
DEL 94%



MIN. 3,5
HORAS
DE DURACIÓN
DE BATERÍA

CONTENIDO DEL EQUIPO SUMINISTRADO



FLEXIBILIDAD EN LA DOSIFICACIÓN



SmartDose
TECHNOLOGY

La tecnología SmartDose™ ajusta automáticamente la dosis de oxígeno a la frecuencia respiratoria de los pacientes, suministrando más oxígeno cuando sea necesario para ayudar a mantener a los pacientes correctamente saturados.

Debido a que los niveles de oxígeno de los pacientes se mantienen consistentes con el nivel de su actividad, ya no es necesario ajustar manualmente la configuración del flujo de oxígeno.

Obtenga la libertad y la confianza para vivir un estilo de vida más activo.