




TENSIÓMETRO DIGITAL

Lenz Pro - Modelo AES-U622

Con LenzPro AES-U622 monitorea tu presión arterial con la confianza de un equipo validado clínicamente.

Este tensiómetro de grado médico combina tecnología oscilométrica, detección de arritmia y memoria para 2 usuarios (90 registros cada uno) en un diseño compacto y fácil de usar.

Cuenta con una pantalla LCD de gran tamaño y batería recargable de litio de 800 mA (o adaptador DC 5V), ofreciendo precisión médica y comodidad en cada medición.

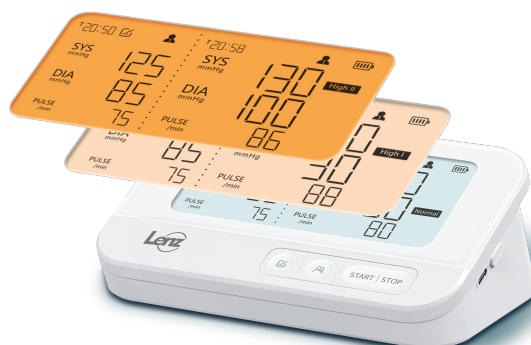

Contenido del empaque

- 1 Monitor de presión arterial
- 1 Brazalete ajustable (22 - 42 cm)
- 1 Cable tipo C
- 1 Bolsa de empaque
- 1 Manual de usuario

Modelo	AES-U622
Método	Oscilométrico
Rango Presión	0-299 mmHg
Rango Pulso	30-240/min
Memoria	2 usuarios x 90 registros
Pantalla LCD	LCD 70.0 x 31.6 mm
Alimentación	Batería de litio recargable 800mA / Adaptador DC 5V 1A



Detección de arritmia
Indicador cardíaco



2 usuarios
90 registros



Batería recargable
Litio 800mA



Pantalla LCD grande
Alta visibilidad

Recomendaciones de uso

- ✓ Colocar el brazalete a 2-3 cm del codo
- ✓ Realizar la medición en reposo
- ✓ Conservar en lugar fresco y seco
- ✓ Evitar mediciones después de ejercicio

