


MONITOR MULTIPARÁMETROS

IM70 2-IBP/CO/CO₂

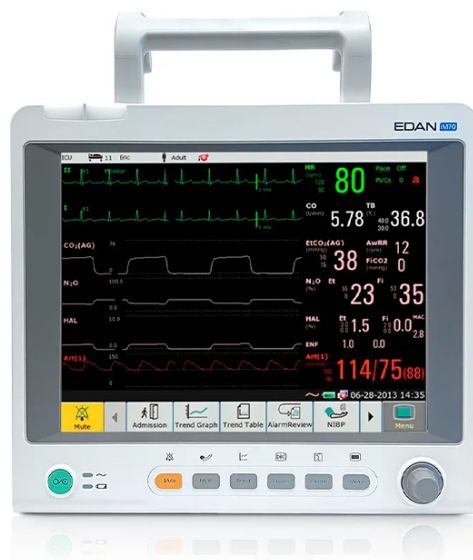

Monitor multiparámetros EDAN IM70 diseñado para la monitorización integral y continua de pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Permite supervisar múltiples parámetros fisiológicos, incluyendo ECG, SpO₂, respiración, presión arterial no invasiva, temperatura, presión invasiva, gasto cardíaco y CO₂.

Características

- Pantalla táctil TFT LCD a color de 12,1 pulgadas.
- Visualización de hasta 11 ondas simultáneamente.
- Monitorización de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- ECG de hasta 12 derivaciones, según configuración.
- Análisis de arritmias y segmento ST.
- Detección de marcapasos.
- Monitorización de 2 canales de presión invasiva (2-IBP).
- Medición de gasto cardíaco (CO) mediante termodilución.
- Capnografía EtCO₂.
- Alarmas visuales y audibles de tres niveles.
- Batería interna de litio recargable.
- Diseño sin ventilador para reducir el ruido durante el funcionamiento.
- Conexión a central de monitoreo.
- Interfaz para cálculo de dosis de medicamentos.

Especificaciones

- Pantalla: TFT LCD táctil a color de 12,1".
- Resolución: 800 × 600 píxeles.
- ECG: 3/5 derivaciones; hasta 12 derivaciones según configuración.
- SpO₂: 0-100%.
- RESP: Adulto 0-120 rpm; pediátrico/neonatal 0-150 rpm.
- NIBP: medición sistólica, diastólica y media en modos manual, automático, continuo y secuencial.
- Temperatura: 2 canales, rango 0-50 °C.
- IBP: 2 canales; rango hasta -50 a 300 mmHg según parámetro.
- CO: termodilución; rango 0,1-20 L/min.
- CO₂: medición de dióxido de carbono exhalado mediante capnografía.
- Dimensiones: 328 × 158 × 285 mm.
- Peso: <5,5 kg sin batería.